

03

CERTIFIED
COMPANY

פלטפורמת לייזר המתקדמת ביותר לטיפול בנגעי
עור כלי דם והסרת שיער
מערכת רב-תכליתית למגוון יישומים רפואיים
ואסתטיים העושה את הכל



NOVISMEDICAL
GROUP


THE VERSATILE LASER PLATFORM
THAT OFFERS TREATMENTS FOR NUMEROUS
AESTHETIC/MEDICAL APPLICATIONS.



xlase
PLUS



פלטפורמת לייזר רב-תכליתית למגוון התמחויות רפואיות ואסתטיות

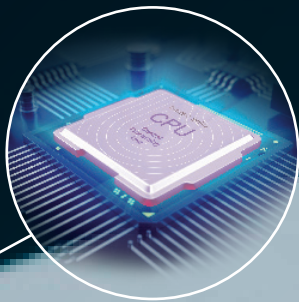

חידושים טכנולוגיים ייחודיים

פלטפורמות ביוטק איטליה מציגות
קונספט חדש
המבוסס על עיצוב חומרה ותוכנה העדכני
ביותר
צוות מחקר ופיתוח מפתח את הדור הבא
של פתרונות חומרה
לתעשיות ההיי-טק הפועלות
בתחום הביצועיים הרפואיים
פתרונות המאפשרים שדרוג מערכת
תמידי
ומבטיחים הספק וביצועים מרביים

מיזוג טכנולוגיות
המפתח לעלייה מדהימה באיכות תוצאות הטיפול
הרפואיים והאסתטיים
התוצאות הרפואיות והאסתטיות

XLASE PLUS

הדרך הפשוטה והמשתלמת ליישום מגוון רחב של
פרוצדורות קוסמטיות ואסתטיות עם פחות סיכונים ותוצאות מעולות
דרגת יעילות ובטיחות הגבוהה ביותר שקיימת היום

פלטפורמת לייזר אינטליגנטית לטיפול בנגעי עור, כלי דם והסרת שיער
מערכת רב תכליתית למגוון יישומים רפואיים ואסתטיים

מיזוג טכנולוגיות

CPL-Calibrated Pulsed Light

YAG לייזר

לייזר דיודה 810 ננומטר

YAG Q-Switched

Erbium YAG

תכונות עיקריות

שילוב טכנולוגיות לייזר ייחודיות
יישומים אסתטיים / רפואיים רבים כולל טיפול בפטרת צפורניים
תפוקת אנרגיה גבוהה לקבלת תוצאות יעילות יותר
ניתן להרחבה ושדרוג
שביעות רצון גבוהה
נייד וקל להעברה



NOVISMEDICAL
GROUP

Diodo Laser 810nm and AlexPro



הדרישה להסרת שיער באזורי גוף נרחבים הולכת וגדלה, אך הטכנולוגיות הקיימות כיום מציבות מספר מגבלות כמו זמן מוגזם שנדרש להשגת הסרת שיער לצמיתות, חוסר בטיחות וקושי בטיפול במספר סוגי עור

Xlase Plus

לייזר הדיודה מייצג את הפיתרון הבטוח והיעיל ביותר לטיפול בשיער לא רצוי. מצויד בטכנולוגיה אופטית חדישה, עוצמה עד 4000 וואט זמין באורך גל יחיד במהירות 810 ננומטר


ולייזר אלכס פרו כפול בגודל 808 ו-760 ננומטר

העיקרון העומד מאחורי המכשיר הוא "פוטותרמוליזיס סלקטיבי": במהלך הטיפול, כרומופור ספציפי, מלנין הנמצא בריכוז גבוהה בבסיס השיער, סופג את אנרגיית האור, הופך אותה לאנרגיית חום עם הרס פוטו-תרמי של היעד




Plug-in Optics

קצה ספיר מצונן ניתן להחלפה בגדלים 12 מ"מ ו-23 מ"מ יתרונות: הליך מהיר, הגנה על האפידרמיס ושמידה על צינור העור לאורך הטיפול

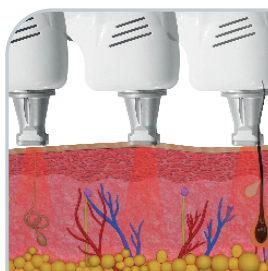

10.10.10 Motion speed

הליך תנועה מהיר המשלב קירור עם פולסי לייזר מהירים מגביר מהירות ונוחות

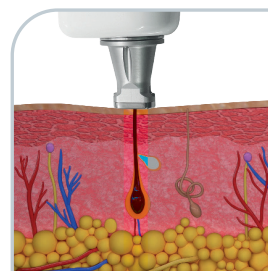


Long Pulse

פולס ארוך מעלה את הטמפרטורה הממוקדת במהלך כל פולס לטיפול אפילו בזקיקים עמוקים

ממשק משתמש


הגדרות קבועות מראש אינטואיטיביות ללמידה מכשיר קל לתפעול

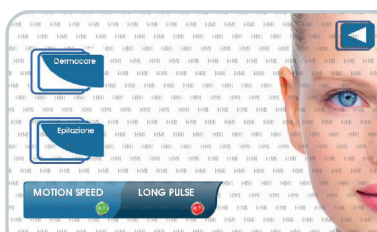

טכנולוגיות ייחודיות



תיבת דיודות לייזר הממוקמות בתא סגור לחלוטין. מבטיחה קרן לייזר יציבה ומדויקת

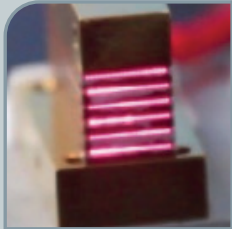

טכנולוגיית פסי לייזר מהודקים המחוברים באופן מכני וללא ריתוך. מבטיחים יעילות גבוהה וטווח עבודה עד 20 מיליון הבזקים



AlexPro 760/808nm

טכנולוגיה בלעדית של ביוטק איטליה מנהל בו זמנית אורכי גל 760 ו-808 ננומטר בהתאם לסוג העור ומאפייני השיער. מבטיח יעילות מוגברת בהסרת שיער מבלונדיני ועד שחור כהה

10.10.10 Motion speed

הליך תנועה מהיר המשלב קירור עם פולסי לייזר מהירים יתרונות

זמן טיפול: גודל ספוט של 10*10 מ"מ, 10 הבזקים בשנייה מאפשר טיפול מהיר באזורים גדולים

יעילות: פחות כרומופורים תלויים, מאפשרים אספקת אנרגיית לייזר בצורה יעילה יותר

בטיחות: השגת היעד על ידי בנייה הדרגתית של אנרגיה **הפחתת כאב:** טכנולוגיה ייחודית עם פולסים נמוכים המעכבת את תחושת הכאב

Super Burst

התפרצויות מרובות של אנרגיית לייזר בעצימות גבוהה בפולסים קצרים **יתרון:** מעניק יעילות ובטיחות גבוהה

Long Pulse

פולס ארוך מעלה את הטמפרטורה הממוקדת במהלך כל פולס לטיפול אפילו בזקיקים עמוקים. עוצמה גבוהה, בקרה על משך זמן הפולס בשילוב קירור מגע

תוצאות קליניות

אינדיקציות לטיפול רפואי:
נגעים בכלי הדם

אינדיקציות לטיפול אסתטי:
הסרת שיער
התחדשות והצערת העור



לפני



אחרי 6 חודשים 4 מפגשים



לפני



אחרי שנה 6 מפגשים



NOVISMEDICAL
GROUP

The clinical cases are a courtesy of Dott.ssa Ferrari and Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica).


SLP Nd:Yag 1064/532nm



לייזר רב תכליתי
בטוח, אפקטיבי ומינימום פולשני
המוליך של יאג מציע אורך גל 1064 ננומטר המאפשר לטפל בכתמי פיגמנטציה עמוקים
ואורך גל 532 ננומטר המאפשר לטפל בנגעי פיגמנטציה שטחיים
הלייזר מציע אורך גל ארוך וקרוב לאינפרא אדום בו חדירת האור לרקמות מגיעה לעומר המרבי
והופכת אותו לבחירה האידיאלית לטיפול בנגעי כלי דם ומתאים לשימוש בכל סוגי העור, כולל עור שזוף



מגוון ספוטים בקוטר 2.5-10 מ"מ
 מאפשרים להגיע לעומק הפעולה
 האופטימלי במהירות ובדיוק

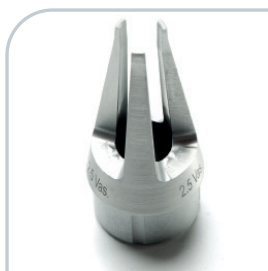

ספוט בקוטר 2.5 מ"מ מאפשר טיפול
 סלקטיבי בנגעים וסקולריים שטחיים
 מבלי לגרום נזק תרמי לרקמות
 הסובבות
 ספוטים בקוטר גדול יותר מאפשרים
 לטפל בנגעים עמוקים יותר בזמן
 קצר יותר




מחבר הלייזר
EASY-PLUG
 משלב קריאת נתוני מים וכח ומאפשר .
 מעבר קל מלייזר אחד לשני

ממשק משתמש

הגדרות קבועות מראש אינטואיטיביות ללמידה
 מכשיר קל לתפעול



טכנולוגיה ייחודית

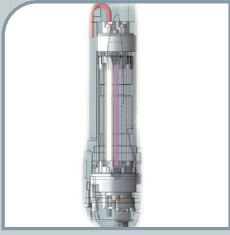

ידית קומפקטית מייצרת שטף קרני
לייזר יציבות במינימום איבוד אנרגיה



חלל אופטי מיועד לכמות גבוהה
ויעילה של קרינה
מינימום איבוד אנרגיה



אלמנט אופטי רפלקטיבי בעל דיוק
גבוהה
מאפשר חלוקת אנרגיה בצורה הומוגנית
על פני כל שטח ומונע הצטברות חום

היתרונות

מקדם ספיגה מצוין, נספג בצורה הומוגנית בשלושת כרומופורי
מטרה העיקריים הממוקדים בטיפול לייזר כירורגיים ואסתטיים,
מלנין, דם ומים

טכנולוגיה ייחודית ההופכת אותו אידיאלי לאיתור נימי דם אותם
מעוניינים להעלים משטח העור. החום נשלח בצורה ממוקדת ביותר
בדיוק היכן שצריך

Nd:YAG 1064

אורך גל לייזר אידיאלי לטיפול בסוגים שונים של נגעי כלי דם
בטוח, אפקטיבי ומינימום פולשני

טיפול אסתטיקה יעילים

שליטה יוצאת דופן על הפולסים וטכנולוגיית תדרים כפולים
מהווה תקן הזהב לתהליכי לייזר אסתטיים שאינם כירורגיים כמו,
פטרות ציפורניים, אקנה, טיפולי כלי דם, הפחתת שיער לצמיתות,
הצרת העור ועוד

לייזר לא אבלטיבי הגורם לחימום עמוק של הדרמיס, מעודד
ייצור קולגן

טיפול בהזעת יתר

מספק אנרגיה אלקטרומגנטית מדויקת ומבוקרת לאזורי בלוטות
הזיעה ומבטל אותן.

תוצאות קליניות

אינדיקציות לטיפול רפואי

נגעים בכלי הדם
הזעת יתר
פטרות ציפורניים
אקנה

אינדיקציות לטיפול אסתטי

הסרת שיער
הצרת העור



לפני



אחרי 90 יום פגישה אחת



לפני




אחרי 60 יום פגישה אחת

QS Nd:Yag 1064/532nm



הבחירה האידיאלית להסרת כתמי פיגמנטציה שפירים ולהסרת קעקועים לא רצויים מבלי להשאיר צלקות אורכי גל הלייזר משתנים מאפשרים הסרת קעקועים בכל הצבעים מבלי לגרום נזק לעור אורך גל 1064 ננומטר יעיל בהסרת צבעי קעקוע כהים: שחור, כחול וירוק אורך גל 532 ננומטר יעיל להסרת צבעים בהירים יותר, אדום, כתום וצהוב טיפול בלייזר גורם לריסוק חלקיקי הצבע ומאפשר לתאי מערכת החיסון לפנותם מהגוף עם סיכון מזערי להיווצרות צלקת או כתם פיגמנטציה

טכנולוגיה המאפשרת מיקוד בכלי הדם בדיוק רב יותר, ללא פגיעה באפידרמיס וללא חשש מיצירת כתם פיגמנטציה באזור הטיפול התוצאה: עור חלק ונקי מנגעי כלי דם

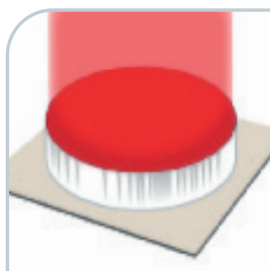

אלמנט אופטי רפלקטיבי בעל דיוק גבוהה מאפשר חלוקת אנרגיה בצורה הומוגנית על פני כל שטח ומונע הצטברות חום מרכזית




טכנולוגיית תהודה ייחודית המספקת תפוקת אנרגית לייזר גבוהה במיוחד תוך זמן קצר מאוד ומייצרת אפקט פוטו אקוסטי המוחץ את הפיגמנטים עד לשכבת הדרמיס



KPT532 עדשת תדר כפול גביש פרואלקטרי הממיר את אורך הגל של 1064 ננומטר ל- 532 ננומטר, עובר מאינפרא אדום בלתי נראה לירוק גלוי, אידיאלי לטיפול בנגעים פיגמנטריים קלים ושטחים ולהסרת קעקועים צבעוניים


ממשק משתמש

הגדרות קבועות מראש אינטואיטיביות ללמידה מכשיר קל לתפעול

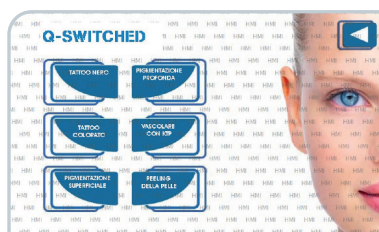

טכנולוגיה ייחודית

יתרונות הלייזר
QS ND:YAG 1064/532

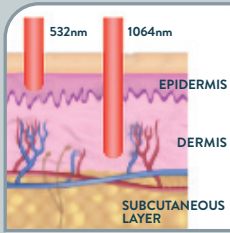

אורכי גל הלייזר המשתנים, מאפשרים הסרת קעקועים בכל הצבעים מבלי לגרום נזק לעור אורך גל 1064 ננומטר יעיל בהסרת צבעי קעקוע כהים: שחור, כחול וירוק אורך גל 532 ננומטר יעיל להסרת צבעים בהירים יותר כמו אדום, כתום וצהוב



פולסים קצרים ואנרגיה גבוהה יוצרים אפקט פוטו-אקוסטי המנפץ את הפיגמנט, ומגביל את האפקט התרמי למטרה ומגן על הרקמות שמסביב



הלייזר פועל בסנרגיה עם פיגמנט פחמן במהלך קילוף העור מתקבל אפקט תרמי הנובע מהאידי התוצאה המתקבלת היא עור קומפקטי ואלסטי

הבחירה האידיאלית להסרת קעקועים לא רצויים בכל הצבעים מבלי לגרום נזק לעור

לייזר אפקטיבי להסרת קעקועים

טיפול בלייזר גורם לריסוק חלקיקי הצבע ומאפשר לתאי מערכת החיסון לפנותם מהגוף, עם סיכון מזערי להיווצרות צלקת או כתם פיגמנטציה

טכנולוגיית תהודה ייחודית מספקת תפוקת אנרגיית לייזר גבוהה במיוחד תוך זמן זמן קצר מאוד, 6-9 ננו שניות, ומייצרת אפקט פוטו אקוסטי המוחץ את הפיגמנטים עד לשכבת הדרמיס

KPT532 עדשת תדר כפול

גביש פרואלקטרי הממיר את אורך הגל של 1064 ננומטר ל-532 ננומטר, עובר מאינפרא אדום בלתי נראה לירוק גלוי אורך גל 1064 ננומטר אידיאלי להסרת קעקועים כחולים שחורים וחומים

השילוב על ידי התדר הכפול יעיל ביותר על פיגמנטים אדומים, חומים זהובים, סגולים וכתומים

הפתרון האולטימטיבי להסרת קעקועים לא רצויים מרובי צבעים ומורכבים

תוצאות קליניות

אינדיקציות לטיפולים רפואיים
נגעים מיקרו-וסקולריים
נגעים וסקולריים שפירים
אינדיקציות לטיפולים אסתטיים
הסרת קעקועים
הצרת העור




לפני



אחרי 30 יום 5 פגישות



לפני

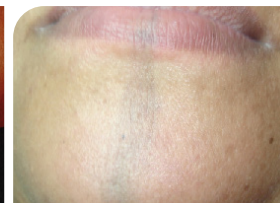


אחרי 60 יום פגישה אחת

Er:Yag fractional 2940nm




הסרת שכבות עור מיקרוסקופיות המביאה לתוצאות יוצאות דופן עם מינימום סיכון ותגובות לוואי


קרן לייזר רבת עוצמה בספקטרום אינפרא אדום מעבירה אנרגיה אופטית היוצרת אידוי מולקולות מים באפידרמיס במטרה לקלף את הרקמה הפגועה האפקט התרמי המשודר לדרמיס גורם לבניית רשת פיברובלסטית מתוקנת המעניקה מיצוק וגמישות לרקמה מטפל בקווי עומק שטחיים ובינוניים, כולל צלקות

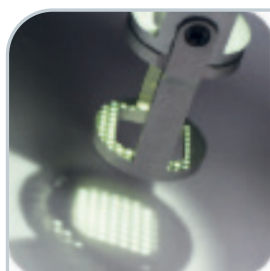

קרני הלייזר עוברות בעזרת עדשה מיוחדת פוגעות ברקמת העור בצורת רשת צפופה. הפגיעה בעור גורמת לפצעים מיקרוסקופיים תת-עוריים

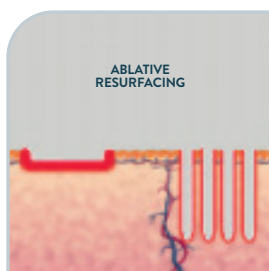

רוחב פולס קצר גורם לצריבת האפידרמיס ולהצערתו עם השפעה תרמית מינימלית לרקמות הבסיסיות

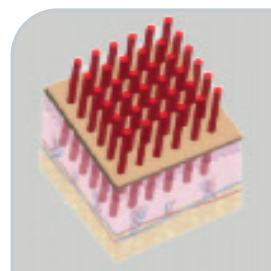


אנרגיית הלייזר מחולקת למספר רב של אלומות פר יחידת שטח. כל אלומה מייצרת כמה ערוצים תרמיים ממוזגים נקודתיים וזעירים, שהרקמה שמסביבן נותרת בריאה. לכן הטיפול נחשב למהיר ונוח יותר למטפל

ממשק משתמש


הגדרות קבועות מראש אינטואיטיביות ללמידה מכשיר קל לתפעול



טכנולוגיה ייחודית

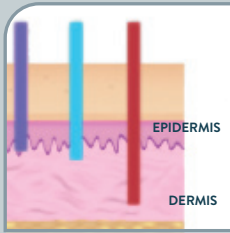

ניתן להשיג אפקט אבליטיבי קר או חם, בהתאם למשך הפולס ולשטף השימוש בו. המבחר הרחב של הפרמטרים מאפשר להשיג את התוצאה הרצויה על כל מטופל

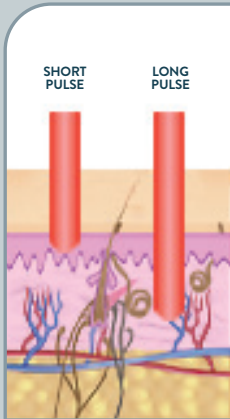

משך פולס קצר בלייזר אבליציה מאפשר לחום להתפזר לרקמה כאשר האבליציה בלייזר מהירה יותר מהפיזור התרמי, החום אינו יכול להתפזר לרקמה

לייזר משייף ארביום באורך גל של 2,940 ננומטר מביאה לשיוף רשתי של רקמת העור, שכבה אחר שכבה בדיוק של מיקרון, תוך אידוי האפידרמיס ויצירת נזק תרמי בדרמיס

קרן לייזר רבת עוצמה בספקטרום רחב של אינפרא אדום מעבירה אנרגיה אופטית היוצרת אידוי מולקולות המים באפידרמיס במטרה לקלף את הרקמה הפגועה ובנוסף האפקט התרמי המשודר לדרמיס גורם לבניית רשת פיברובלסטית מתוקנת המעניקה מיצוק וגמישות לרקמה

טיפול התחדשות עור יעילים עם רמות נוחות גבוהות יותר וזמני התאוששות קצרים יותר

תוצאות קליניות

אינדיקציות לטיפול רפואי

גידולים עוריים שפירים
שיפור מראה עור מצולק וצלקות אקנה

אינדיקציות לטיפול אסתטי

טיפולים לתיקון פגמים, שיפור והצרת העור



לפני



אחרי 90 יום פגישה אחת



לפני




אחרי 45 יום 3 פגישות


CPL Calibrated Pulsed Light



המוליך מורכב ממנורת קסנון ועדשה אופטית מיוחדת המסוגלת לייצר קרן אור אינטנסיבית מאוד המקרינה באופן סלקטיבי על אזור הטיפול פילטר אופטי מיוחד הניתן להחלפה מכוון את אורך הגל לסוג העור והפגמים שיש לטפל בהם האור הנפלט ממריץ את ייצור הקולגן ומשפר את הגוון, המרקם והבהירות של העור פועל בצורה לא פולשנית עם דיוק ומהירות ביצוע באמצעות מבחר מסננים אופטיים ניתן לבחור את אורכי הגל האידיאליים לטיפול יעיל במספר רחב של מצבי העור.

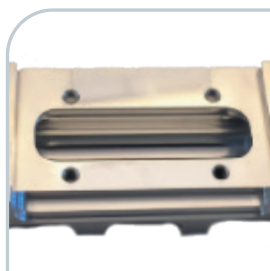

חלל השתקפות מצופה פלטינה מאפשר רפלקטיביות מעל 98% הציפוי מבטיח יעילות ועמידות.

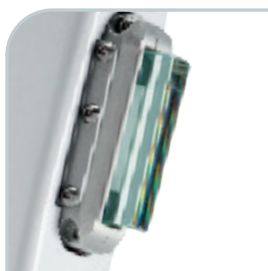

שילוב מגע קור רציף מצמצם סיכון לכוויות ומאפשר שימוש באנרגיה גבוהה יותר לשטח מסוים על הרקמה



חלון טיפול בגודל 50 * 10 מ"מ ועד ל-3 פולסים בשנייה מאפשר להסיר את כל הכתמים ומבטיח שיעור כיסוי מלא

ממשק משתמש


הגדרות קבועות מראש אינטואיטיביות ללמידה מכשיר קל לתפעול



טכנולוגיה ייחודית



שישה מסננים אופטיים מבטיחים סלקטיביות רבה יותר של אורך הגל הנפלט ומטפלים ביעילות במגוון בעיות עור

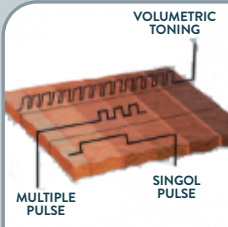

חיטוב נפחי: הפתרון היעיל ביותר לטיפול בשינוי צבע העור והצערות, באמצעות תצורות פולס מהירות 15 פעימות בשנייה

יתרונות

מתבסס על פליטת מנורת קסנון בשילוב מערכת קירור מים וטכנולוגיית דופק מרובע משתמש בספקטרום רחב של אור בעוד לייזרים פולטים אורך גל יחיד המוליד מייצר ספקטרום שטוח של אור בין 410 ל-1200 ננומטר



שילוב מגע קור רציף מצמצם סיכון לכוויות ומאפשר שימוש באנרגיה גבוהה יותר לשטח מסוים על הרקמה

סלקטיביות מעולה

שישה מסננים אופטיים מבטיחים סלקטיביות רבה יותר של אורך הגל הנפלט ומטפלים ביעילות במגוון בעיות עור הטיפולים עדינים ומציעים תוצאות הדרגתיות עם מינימום זמן החלמה וסיכון מופחת לתופעות לוואי

פולסים בצורת ריבוע

פולס אחיד יוצר תהליך חימום מונע עלייה איטית ונפילה ארוכה וחדשה בעוצמת הפולס ביצועים מיטביים ונוחות למטופל

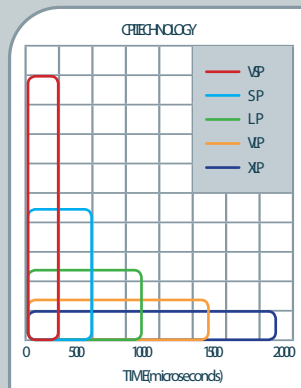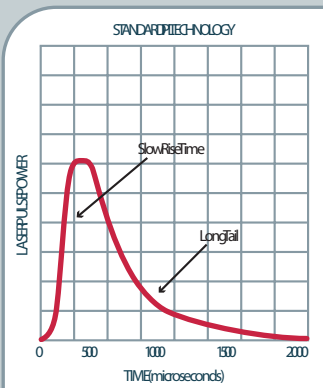

תוצאות קליניות

אינדיקציות לטיפולים רפואיים

נגעים פיגמנטריים שפירים
נגעים וסקולריים שפירים
נגעים מיקרו-וסקולריים
אקנה

אינדיקציות לטיפולים אסתטיים

הסרת שיער
התחדשות העור



לפני



אחרי 60 יום פגישה אחת



לפני



אחרי חצי שנה 5 מפגשים

biotec italia
xlase
 PLUS

הדרך הפשוטה והמשתלמת ליישום מגוון רחב של
 פרוצדורות קוסמטיות ואסתטיות
 עם פחות סיכונים ותוצאות משופרות
 מיזוג טכנולוגיות
 הוא המפתח לעלייה מדהימה באיכות
 התוצאות הרפואיות והאסתטיות.

- Laser Diode 810 and Alex Pro
- SLP Nd:Yag 1064/532nm
- QS Nd:Yag 1064/532nm
- Er:Yag fractional 2940nm
- CPL (Calibrated Pulsed Light)



VIDEO
TUTORIAL



NOVISMEDICAL
 GROUP

The design of the machine may slightly differ from the image,
 while keeping the described functions unchanged.



xlase

PLUS

TECHNICAL DATA

ALIMENTAZIONE	230 VAC 50/60Hz
POTENZA	2000W (Max)
CLASSE E TIPO	II BF
DIMENSIONE XLASE STANDING	340x1000x670 mm
PESO XLASE STANDING	61 Kg (only equipment) - 71 Kg (with 5 handpieces) equipment whit 4 wheels
DIMENSIONE TABLE TOP	530x350x650 mm
PESO TABLE TOP	36 Kg (only equipment) - 46 Kg (with 5 handpieces) equipment for use on a desk
FUSIBILI	2x 10A 400V

DIODE

LASER TYPE	HIGH POWER DIODE
CLASS	IV
WAVELENGTH	810nm
PULSE WIDTH	<60ms USING CONTINUOUS PULSES
REPETITION RATE	FROM 1 TO 10Hz
FLUENCE TO TISSUE	UP TO 56J/cm ²
SPOT SIZE	9 X 9mm STANDARD
SKIN COOLING	WATER COLD SAPPHIRE
EXPECTED LIFETIME	20.000.000 PULSES
LASER EMISSION CONTROL	FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

SLP ND:YAG

LASER TYPE	ND:YAG
CLASS	IV
WAVELENGTH	1064nm (532nm WITH KTP LENS)
ENERGY DENSITY	UP TO 22J
PULSE DURATION	FROM 250µs to 50ms
SPOT SIZE	2,5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 10mm
REPETITION RATE	FROM 1 TO 10Hz
AIMING BEAM	DIODE LASER, 1mW @ 635nm - CLASS II
EMISSION CONTROL	FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

QS ND:YAG

LASER TYPE	CR:YAG
CLASS	IV
WAVELENGTH	1064nm (532nm WITH KTP LENS)
PULSE DURATION	9ns
SPOT SIZE	2,5 / 4 / 5 / 6 / 7mm
PULSE REPETITION RATE	FROM 1 TO 6Hz
ENERGY DENSITY	UP TO 2,4J
AIMING BEAM	DIODE LASER, 1mW @ 635nm - CLASS II
LASER EMISSION CONTROL	FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

ER:YAG FRACTIONAL

LASER TYPE	ER:YAG
CLASS	IV
WAVELENGTH	2940nm
PULSE DURATION	0,5ms - 1ms - 1,5ms - 2ms
ENERGY	UP TO 2J
REPETITION RATE	FROM 1 TO 4Hz
SPOT SIZE	6mm (ABLATIVE/FRACTIONAL)
NUMBER OF STACK	FROM 1 UP TO 6
EXPECTED LIFETIME	500.000 PULSES
LASER EMISSION CONTROL	FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

CPL (CALIBRATED PULSED LIGHT)

SOURCE	XENON LAMP
SPECTRUM OF EMISSION	550-1200nm; 550-950nm; 650-950nm 410-1200nm; 695-1200nm; 755-1200nm
PULSE DURATION	FROM 1 TO 50ms
ENERGY	UP TO 36J/cm ²
DELAY BETWEEN PULSES	FROM 5 TO 60ms
NUMBER OF PULSES	FROM 1 TO 5
REPETITION RATE	UP TO 3Hz
TREATMENT AREA	50mm x 10mm (5cm ²)
EMISSION CONTROL	FOOTSWITCH & HANDPIECE SWITCH

APPLICATORI



A SOLID COMPANY

With over 25 years of experience, Biotec Italia is a well-recognized developer and manufacturer of lasers, electronic, mechanical and pneumatic based technologies for the medical and aesthetic industry. Located in Vicenza, northern Italy, and with a branch in London, United Kingdom, Biotec Italia exports in over 50 countries worldwide and offers customers an international services and sales network.

100% MADE IN ITALY

With innate passion for the Made in Italy's innovation and expertise, Biotec Italia keeps a close relationship with the tradition of his territory and strives to achieve unsurpassed excellence and reliability in manufacturing, supplying high quality products and services to customers and commercial partners. To reach this goal Biotec Italia assures "total customer satisfaction".

FROM THE IDEA TO THE FINISHED PRODUCT

With a dedicate R&D structure, several registered patents and combining Italian competence and creativity in the design and assembly processes, Biotec Italia pushes the ongoing change that generates progress. The intellectual assets of the company are the key for innovative technologies and advanced production methods for a wide variety of medical and aesthetic applications.

CERTIFICATIONS AND QUALITY STANDARDS

To certify its quality, Biotec Italia adheres to the ISO 13485 company manufacturing policy and Bureau Veritas product Safety and Quality Certification marks, which guarantees that products have met applicable safety requirements and quality standards. Customers can be assured that they are buying a safe product that has been investigated to particular safety requirements by an accredited third party and is supported by regular



NOVIS MEDICAL GROUP
TOPAZ STREET 42
CASEAREA
WWW.NOVISMEDICAL.COM
E CONTACT@NOVISMEDICAL.COM